


HOMEDICS®

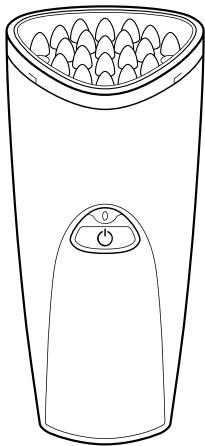

TANDA

clear+™

instructions for use

# Grazie...

per aver acquistato il nuovo dispositivo Clear+. Clear+ rappresenta il primo e unico dispositivo basato su una combinazione tra una potente luce blu in grado di eliminare i batteri e una vibrazione sonora unita a un riscaldamento leggero per risultati di pulizia clinicamente testati. L'unione di queste tre tecnologie garantisce una velocità e un'efficacia senza pari per una pelle rilassata, pulita e bella.

Per informazioni più complete relative alla sicurezza e alle modalità di utilizzo del dispositivo, leggere integralmente il libretto delle istruzioni per l'uso.

#### **Informazioni di contatto per l'assistenza clienti:**

HoMedics Italy Srl


Via Carducci, 125

20099 Sesto San Giovanni (MI) – Italia

Tel: +39 0269 430776

Email: [tandaservice@homedics.it](mailto:tandaservice@homedics.it)

Sito Internet: [www.homedics.it](http://www.homedics.it)

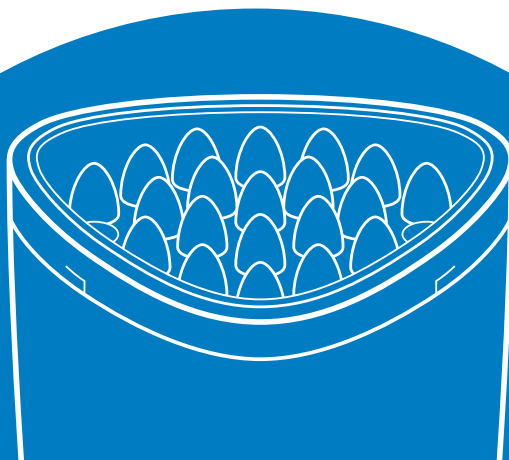


## Contenuto della confezione:

- Testina per i trattamenti Clear+ (1)
- Dispositivo ricaricabile senza fili Clear+ (2)
- Base per la ricarica (3)
- Alimentazione
- Occhialini di sicurezza

### Componenti:

- Cappuccio in plastica (connettore alimentazione) (4)
- Pulsante di accensione arancione (5)
- Luce di segnalazione (6)

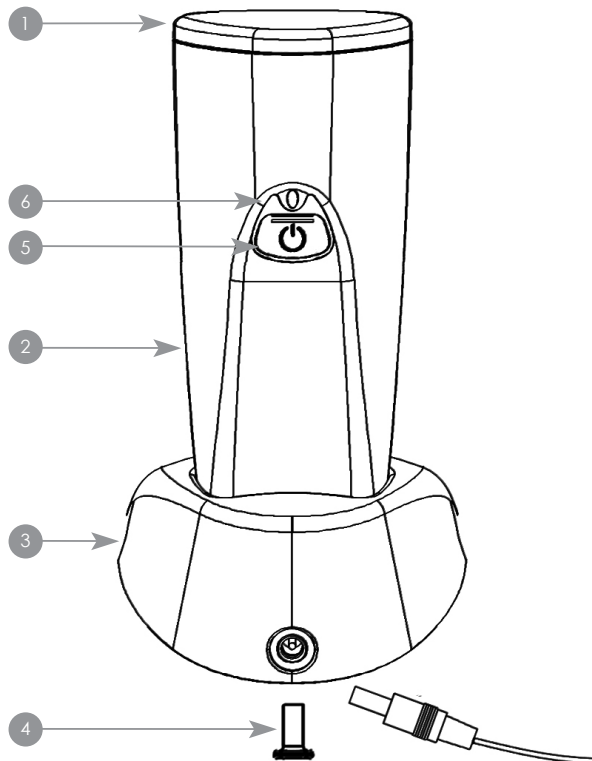

# Utilizzi del dispositivo

Clear+ è un dispositivo per il trattamento dell'acne infiammatoria di grado lieve- moderato.

## Clear+ è il dispositivo che fa per te?

Tipo di acne	Descrizione della patologia	Clear+ è il dispositivo che fa per te?
Acne lieve	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vari brufoli infiammati – di colore rosso</li><li>• Meno di 20 brufoli con punta bianca, meno di 15 brufoli rossi infiammati o meno di 30 brufoli totali, non tutti infiammati</li></ul>	Sì
Acne moderata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eventuali brufoli infiammati (di colore rosso) e pustole (accumulo visibile di pus nella pelle)</li><li>• Da 20 a 100 punte bianche, da 15 a 50 brufoli infiammati o da 30 a 125 brufoli totali, non tutti infiammati</li></ul>	Sì
Acne nodulare grave	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brufoli e pustole infiammati (accumulo visibile di pus nella pelle) con alcune lesioni nodulari profonde (è possibile avvertire la presenza di una massa solida sottocutanea, talvolta può essere rialzata rispetto alla superficie cutanea)</li><li>• Più di 5 cisti (massa cutanea solida simile a un nodo, può essere rialzata rispetto alla superficie cutanea o avvertita nell'area sottocutanea), conteggio totale di punte bianche superiore a 100 o conteggio infiammatorio totale superiore a 50 o a 125 lesioni totali</li></ul>	No, consultare il proprio dermatologo per la prescrizione del trattamento migliore
Acne cistica grave	<ul style="list-style-type: none"><li>• Molte lesioni cistiche nodulari (con segni di cicatrici)</li></ul>	No, consultare il proprio dermatologo per la prescrizione del trattamento migliore

Per un utilizzo sicuro del dispositivo Clear +, leggere attentamente i paragrafi "Controindicazioni", "Avvertenze" e "Precauzioni" che troverete di seguito.

## Controindicazioni

**Non utilizzare** questo dispositivo su eventuali lesioni sospette o cancerose. L'utilizzo del dispositivo su lesioni cancerose o di altra natura potrebbe determinare un rallentamento del trattamento medico in uso per la patologia. Tra le caratteristiche tipiche di potenziali lesioni cancerose vi sono:

- **Asimmetria:** una metà dell'area cutanea anomala è diversa dall'altra metà
- **Contorni:** contorni irregolari
- **Colore:** varia da un'area all'altra con sfumature marroncino chiaro, marroni o nere (talvolta bianche, rosse e blu)
- **Diámetro:** generalmente (ma non sempre) superiore a 6 mm (diámetro della gomma su una matita)
- **Sanguinamento:** qualsiasi crescita cutanea che sanguina o che non guarirà

**Non utilizzare** in caso di episodi passati di crisi epilettiche.


Si consiglia di testare il dispositivo su una piccola parte di pelle meno sensibile (es.: avambraccio).

### Test di fotosensibilità

Seguire le istruzioni seguenti per verificare l'eventuale fotosensibilità:

1. Premere il pulsante di accensione arancione.
2. Posizionare il dispositivo su un'area dell'avambraccio (come illustrato nel diagramma sulla destra). Mantenerlo a contatto per l'intero ciclo di trattamento della durata di 3 minuti.
3. Premere nuovamente il pulsante di accensione per effettuare un altro trattamento di 3 minuti sulla stessa area interna del braccio.
4. Attendere 24 ore. NON dovrebbero verificarsi controindicazioni nelle 24 ore successive.

Una controindicazione consiste in una sensazione di dolore o di fastidio nelle aree sottoposte al trattamento e in una manifestazione di rossore prolungato della pelle.

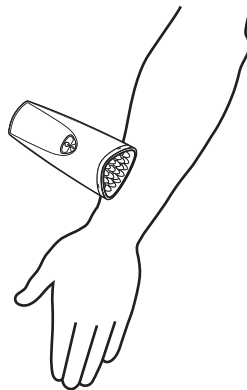

# Avvertenze

**Avvertenza: Interrompere l'utilizzo** del dispositivo in caso di fastidio o di rossore della pelle della durata superiore alle due ore. Potrebbe trattarsi di fotosensibilità o di un'altra condizione patologica. Consultare il proprio medico di fiducia.

**Avvertenza: Non utilizzare** il dispositivo in caso di gravidanza o di allattamento.

**Avvertenza: Non utilizzare** se negli ultimi due anni avete sofferto di un grave attacco di emicrania.

**Avvertenza: Non utilizzare** su ghiandole tiroidee (area del collo). Ciò potrebbe stimolarne la crescita.

**Avvertenza:** Per ridurre il rischio di scariche elettriche che potrebbero determinare lesioni o morte:

- Collegare **sempre** l'adattatore di corrente AC prima al dispositivo, poi alla presa di corrente.
- **Non posizionare** o custodire il dispositivo in punti dai quali potrebbe cadere o essere inavvertitamente spinto in vasche da bagno o lavandini.  
Non mettere o immergere in acqua o in altri liquidi
- **Tenere** tutti i dispositivi elettrici (compresa l'unità Clear+) **lontani** dall'acqua (comprese vasche da bagno e docce) In caso di caduta accidentale dell'unità in acqua, staccare immediatamente la spina.
- **Tenere il cavo elettrico lontano** da superfici riscaldate.
- **Non** inserire o **lasciar cadere** oggetti nelle fessure del dispositivo.
- **Utilizzare esclusivamente** l'adattatore di corrente fornito con il dispositivo Clear+.
- **Non utilizzare** questo dispositivo in caso di danneggiamento del cavo elettrico o della spina, di funzionamento non corretto, di caduta, guasto o immersione in acqua. caso di guasto contattare il servizio clienti HoMedics (vedi paragrafo Informazioni sulla garanzia).
- **Non manomettere** il dispositivo, questo potrebbe danneggiare l'unità, determinarne il malfunzionamento, causare scosse elettriche, ustioni o lesioni personali. Non sono previste componenti riparabili dall'utilizzatore all'interno dell'unità.
- **Tenere fuori dalla portata** dei bambini se non supervisionati da adulti.

**Avvertenza:** Per prevenire incendi o gravi ustioni:

- In caso di principio di surriscaldamento, **spegnere immediatamente** il dispositivo Clear+.
- **Tenere lontano** da sostanze volatili e infiammabili o da aree in cui viene somministrato ossigeno.

# Precauzioni

**Spegnere immediatamente**, il dispositivo in caso di eventuali effetti indesiderati o di dubbi sull'utilizzo. Contattare il proprio medico. Potrebbe verificarsi una reazione fotosensibile.

**Utilizzare** il dispositivo esclusivamente per l'uso previsto in base a quanto delineato nel presente manuale.

**Utilizzare** con occhialini di sicurezza protettivi forniti nella confezione Clear+.

**Non guardare direttamente** la fonte luminosa della testina di trattamento del dispositivo durante il funzionamento.

**Non utilizzare** in caso di aumento della condizione patologica della fotosensibilità. Se non si è sicuri di un eventuale aumento della condizione patologica della fotosensibilità, si consiglia di eseguire il Test di fotosensibilità descritto alla pagina 44.

**Non utilizzare** in caso di assunzione di farmaci noti per la loro capacità di causare fotosensibilità. Esempi comuni di composti farmacologici che potrebbero causare la fotosensibilità sono: antistaminici, farmaci per la cura di raffreddore e antiallergici, farmaci non steroidei e anti-infiammatori (FANS/NSAID) utilizzati per ridurre il dolore e l'infiammazione in caso di artrite; antibiotici, compresi tetracicline e sulfamidici o sulfa farmaci. Esempi comuni di composti non farmacologici che potrebbero causare la fotosensibilità sono: deodoranti, saponi antibatterici, dolcificanti artificiali, agenti illuminanti fluorescenti per cellulosa, nylon e fibre legnose, tra cui detersivi per bucato, naftaline (palline di naftalina), prodotti petroliferi e solfuro di cadmio, una sostanza chimica iniettata nella pelle per i tatuaggi.

**Non utilizzare** il dispositivo congiuntamente a steroidi topici, steroidi sistemici o FANS/ NSAID per alleviare il dolore o risolvere problemi cutanei. Ciò potrebbe determinare una reazione fotosensibile.

**Non utilizzare** se ci si è sottoposti di recente ad iniezioni di steroidi e nelle aree limitrofe all'area dell'iniezione stessa. Ciò potrebbe determinare una reazione fotosensibile.

**Smaltire** tutti i prodotti conformemente alle disposizioni e ai codici locali e nazionali.

**Non azionare** l'unità in un ambiente in cui vengono utilizzati altri dispositivi che emettono energia elettromagnetica e che vengono utilizzati senza protezione. Radio portatili, cellulari o altri strumenti di comunicazione a radiofrequenza possono compromettere il funzionamento corretto dei dispositivi elettrici medicali.

**Non graffiare**, segnare o danneggiare in altro modo la superficie di emissione luminosa.

**Non puntare** la fonte luminosa negli occhi di altre persone.

**Un utilizzo** e una manutenzione **scorretti** del dispositivo Clear+, ovvero non conformi alle istruzioni delineate in questo manuale, comporteranno l'invalidamento della garanzia.

**Leggere** tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo Clear+.

**Controllare** il dispositivo prima di ogni utilizzo. Verificare l'eventuale presenza di danni.

**Azionare**, trasportare e conservare il dispositivo Clear+ in base alle modalità specificate nel presente manuale.

Eventuali **modifiche** o interpretazioni delle procedure diverse da quanto specificato nel presente documento potrebbero provocare ferite.

# Rischi

Pericolo	Probabilità di eventi pericolosi	Conseguenze per l'utilizzatore
Possibili problemi elettrici	Occorrenza improbabile	Shock
Surriscaldamento	Occorrenza sporadica	Fastidio, interruzione del trattamento
Alimentazione non adeguata per l'unità	Occorrenza improbabile	Il dispositivo non sarà funzionante
Utilizzo del prodotto per funzioni diverse da quanto descritto	Occorrenza improbabile	Danno all'unità
L'utilizzatore non segue le istruzioni di manutenzione	Occorrenza improbabile	Perdita di efficacia del prodotto
Surriscaldamento delle batterie	Occorrenza improbabile	Surriscaldamento del manico che può causare fastidio
Esplosione della batteria	Occorrenza improbabile	Può causare ustioni o ferite gravi
Fuoriuscita di liquido dalle batterie	Occorrenza improbabile	Può causare ustioni o ferite gravi
Cablaggio in cortocircuito	Occorrenza improbabile	Può determinare il surriscaldamento del manico che può causare, a sua volta, fastidio per l'utilizzatore
L'utilizzatore potrebbe puntare inavvertitamente la luce negli occhi	Occorrenza sporadica	Fastidio e possibile mal di testa
L'utilizzatore potrebbe puntare la luce negli occhi	Occorrenza improbabile	Fastidio e possibile mal di testa
L'utilizzatore potrebbe avere una pelle sensibile al trattamento con la luce	Occorrenza improbabile	Può causare l'arrossamento della pelle
L'utilizzatore sta assumendo dei medicinali o prodotti omeopatici che causano una maggiore fotosensibilità	Occorrenza improbabile	Può causare l'arrossamento della pelle
Utilizzo del prodotto ogni giorno per un periodo di tempo superiore all'esposizione massima raccomandata per ciascuna area	Occorrenza sporadica	Trattamento non efficace



Pericolo	Probabilità di eventi pericolosi	Conseguenze per l'utilizzatore
Utilizzo del dispositivo intorno all'area del collo da parte di persone con patologia tiroidea	Occorrenza improbabile	Possibile sollecitazione della crescita delle ghiandole tiroidee
Utilizzo del dispositivo da parte di soggetti che si sono sottoposti di recente a iniezioni steroidee	Occorrenza improbabile	Reazioni non previste
Diagnosi errata relativamente al proprio grado di acne infiammatoria lieve - moderata	Occorrenza probabile	L'utilizzatore potrebbe utilizzare il dispositivo su forme di acne più gravi o su altre forme che normalmente richiederebbero diverse tipologie di trattamento o persino cure mediche. Tale tentativo potrebbe determinare un rallentamento dell'efficacia del trattamento suggerito dal proprio medico.
Sono elencati esclusivamente i rischi noti correlati al dispositivo. Durante l'utilizzo del dispositivo, potrebbero verificarsi rischi diversi da quelli verificatisi durante la sperimentazione che potrebbe non essere stata esaustiva. Gli utilizzatori del dispositivo possono ridurre i possibili rischi derivanti dall'utilizzo solo leggendo accuratamente il manuale d'uso in tutte le sue parti e seguendo scrupolosamente tutte le istruzioni, le controindicazioni, le avvertenze e le precauzioni previste.		

## Benefici

Beneficio	Probabilità di occorrenza del beneficio	Conseguenze per l'utilizzatore
Riduzione dell'acne infiammatoria di grado lieve-moderata	Frequenti	Miglioramenti delle condizioni della pelle dovuto alla riduzione dell'acne di grado lieve- moderata
Gli utilizzatori del dispositivo otterranno i benefici descritti dall'utilizzo dell'unità solo leggendo e seguendo scrupolosamente tutte le istruzioni contenute nel manuale d'istruzione.		


# Informazioni sull'acne

La comparsa di brufoli avviene in momenti quali i cambiamenti ormonali che determinano la secrezione di sebo in eccesso (olio) da parte delle ghiandole sebacee. Il batterio propionibacterium acnes si nutre di questo sebo in eccesso e comincia il suo processo di moltiplicazione. I peli, il sebo e le cellule di pelle morta ostruiscono il poro, intrappolando al suo interno i batteri che cominciano a moltiplicarsi. I globuli bianchi intervengono così per contrastare i batteri invasori. Il brufolo è il risultato di questo processo.


## La scienza dietro la luce blu

La terapia a luce blu offre una soluzione efficace e naturale per il trattamento e la prevenzione dell'acne infiammatoria di grado lieve e moderato. Questa tecnologia avanzata, un tempo disponibile solo presso gli studi dermatologici, si è rivelata più efficace del perossido di benzoide\*\*, in quanto privo di effetti collaterali quali secchezza, irritazione o desquamazione. La potente luce blu emanata dal dispositivo Clear+ ha un effetto fototossico sui batteri che determinano la comparsa dell'acne e fa sì che gli stessi batteri si autodistruggano, interrompendo il ciclo dell'acne in modo semplice e pulito. Le caratteristiche quali la vibrazione sonora e il leggero calore facilitano la dilatazione dei pori e consentono alla potente luce blu a 414nm di attaccare un numero superiore di batteri. Questo determina un miglior risultato nella purificazione della pelle.


Godetevi di risultati professionali nella purificazione della pelle quando e dove volete.

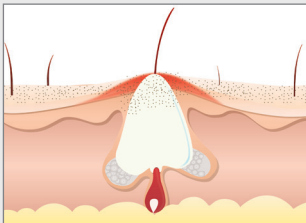

Formazione dell'acne. I batteri propionibacterium acnes si nutrono di sebo che consente loro di moltiplicarsi causando l'infiammazione e quindi il brufolo.

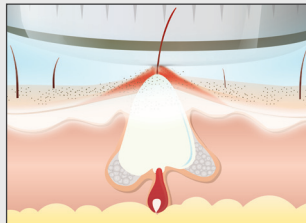

La Luce LED Blu combatte i batteri propionibacterium acnes, uccidendoli.

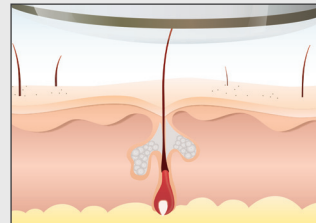

Pelle Purificata

\*\* Papageorgiou P., Katsambas, A. Chu, A. (2000). Trattamento fototerapico dell'acne volgare con luce blu (415 nm) e rossa (660 nm). British Journal of Dermatology.

# Avvio

## Configurazione del dispositivo

È facile iniziare a lavorare con il dispositivo Clear+.


1. Rimuovere il dispositivo e i suoi accessori dall'imballo.
2. Staccare il rivestimento protettivo dalla testina di trattamento e gettarlo.
3. Il dispositivo presenta una batteria interna ricaricabile. Per il primo utilizzo, sarà necessario caricare completamente il dispositivo per circa 4 ore. Consultare il paragrafo **Caricamento delle batterie** per maggiori dettagli.

## Caricamento delle batterie

- Prima di caricare il dispositivo, rimuovere il cappuccio in plastica (4) dalla parte inferiore del manico senza fili Tanda. In caso di mancata esecuzione di questa operazione, non sarà possibile inserire correttamente l'unità nella base ricaricabile.
- Posizionare il dispositivo in modo stabile sulla base ricaricabile (3).
- Collegare l'alimentazione alla base ricaricabile e l'altra estremità alla presa di corrente AC (es.: una presa da muro).
- Il dispositivo impiegherà approssimativamente 4 ore per ricaricarsi.
- La luce di segnalazione (6) diventerà arancione durante la carica del dispositivo e si spegnerà una volta completata.
- Il dispositivo è ora pronto per essere utilizzato con la sola batteria. Un dispositivo completamente carico sarà in grado di eseguire 10 cicli da tre minuti.

### Nota:

- E' possibile utilizzare il dispositivo anche collegandolo direttamente ad una presa di corrente (es: la classica presa da muro). Collegare semplicemente un'estremità dell'alimentazione nell'apposita sezione posta nella parte inferiore del manico e l'altra estremità del cavo alla presa di alimentazione AC.

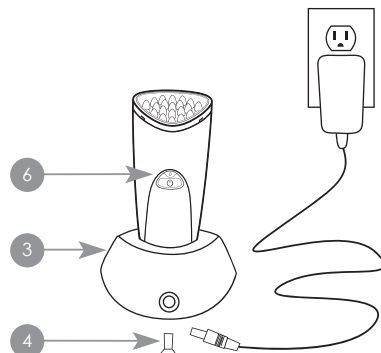

# Comandi del dispositivo Clear+

Il dispositivo prevede spie luminose e sonore che consentono di scandire i cicli di trattamento e di verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

## Segnalazioni luminose

Verde lampeggiante	Il dispositivo è pronto per l'uso oppure si sta eseguendo un trattamento
Arancione fisso	È in corso il caricamento della batteria
Rosso fisso	Si è verificato un errore. Ciò potrebbe dipendere da:  un problema nel posizionamento della testina, verificare che sia posizionata correttamente nel suo alloggiamento.  Il livello di batteria è basso  L'unità potrebbe essere surriscaldata. Spegnerne e lasciar raffreddare per almeno 5-10 minuti prima di riaccendere Luxe
Off	Il dispositivo è spento

## Segnalazioni sonore

Un bip	Avvio del trattamento
Un bip veloce ogni 30 secondi	È in corso un trattamento e sono passati 30 secondi dall'ultimo bip o dall'inizio del trattamento
Due bip	Fine del ciclo di trattamento oppure batteria scarica
Tre bip	Temperatura elevata sulla superficie della testina di trattamento
Quattro bip	La testina non è posizionata correttamente nel suo alloggiamento o è stata rimossa ad unità accesa.



# Modalità di utilizzo

## Acquisire familiarità con il dispositivo

Il dispositivo è concepito garantendo la massima sicurezza e facilità di utilizzo.

- Per avviare il dispositivo Clear+, premere una volta il pulsante di accensione arancione. Dopo aver attivato l'unità, la luce di segnalazione si illuminerà di verde.
- La testina di trattamento del dispositivo prevede un  **sensore di contatto**  integrato che fa attivare rispettivamente la luce blu purificante, la vibrazione sonora e il leggero calore solo nel momento in cui la testina entra a contatto diretto con la pelle.
- Il dispositivo si spegnerà automaticamente se non viene messo a contatto con la pelle entro 20 secondi o se il trattamento viene interrotto per un tempo superiore ai 20 secondi.
- La testina di trattamento del dispositivo prevede una funzione di sicurezza aggiuntiva: un  **sensore della temperatura**  in grado di spegnere l'unità in caso di surriscaldamento della superficie del dispositivo. Far raffreddare il dispositivo per 5-10 minuti prima del riavvio.
- Il dispositivo funziona su cicli della durata di tre minuti. Un bip sonoro emesso ogni 30 secondi indicherà l'accensione del dispositivo. Due bip veloci indicheranno il completamento del ciclo. Premere il pulsante di accensione per riattivare l'unità.

## Passo 1: Preparazione della pelle per il trattamento

Prima dell'utilizzo, detergere la pelle per rimuovere eventuali creme o prodotti cosmetici che potrebbero contenere sostanze riflettenti.

## Passo 2: Trattamento della pelle

Dopo aver attivato il dispositivo Clear+, posizionare delicatamente la testina di trattamento su ciascuna area interessata da un'eruzione cutanea e lasciare agire per un ciclo di trattamento completo di tre minuti, due volte al giorno. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare tutti i giorni fino alla scomparsa dell'eruzione cutanea.

## Passo 3: Dopo il trattamento

Applicare la propria crema non- comedogena preferita.



# Cosa aspettarsi da Clear+

## PRIME 24-48 ORE:

Durante il trattamento, si avvertirà una sensazione di calore sulla pelle spesso considerata rilassante. In molti casi si noterà una diminuzione delle dimensioni delle imperfezioni e un miglioramento del colorito.

## DOPO 1 SETTIMANA DI TRATTAMENTO:

Nella maggior parte di casi si osserverà una diminuzione del numero delle imperfezioni. Nella maggior parte dei casi si osserverà anche una riduzione del rossore e della oleosità della pelle e si continuerà a notare un generale miglioramento delle condizioni della cute. Se usato regolarmente, il dispositivo Clear+ determinerà una riduzione significativa della quantità di batteri che causano l'acne e aiuterà a prevenire la comparsa di nuove eruzioni cutanee in futuro.

## Sicurezza degli occhi

Gli occhialini protettivi sono forniti per garantire comfort e sicurezza a quelle persone che percepiscono l'intensità della luce come troppo elevata. Test condotti aziendali hanno dimostrato che la luce emessa dal dispositivo, se usata seguendo le avvertenze contenute nel presente manuale d'uso, non rappresenta un rischio per gli occhi.

- Posizionare gli occhialini protettivi davanti agli occhi.
- Stringere la fascia elastica in modo da adattare comodamente gli occhialini protettivi intorno alla testa.

**Nota:** Non puntare la fonte luminosa direttamente negli occhi.



# Manutenzione del dispositivo

Le istruzioni di manutenzione che seguono rappresentano suggerimenti importanti per garantire un funzionamento duraturo del dispositivo così come da progettazione. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare un'interruzione dell'erogazione dell'emissione della luce o del funzionamento complessivo del dispositivo.

## Gestione della batteria

Si consiglia di tenere il dispositivo completamente carico. Dopo l'utilizzo, posizionare il dispositivo sulla base per la ricarica. Non è possibile eseguire una ricarica eccessiva del dispositivo.

In caso di mancato utilizzo del dispositivo per periodi di tempo prolungati, si consiglia di lasciarlo nell'alloggiamento senza collegare l'adattatore di corrente.

## Pulizia

Dopo ogni utilizzo, si consiglia di pulire la superficie della testina di trattamento.

Il dispositivo non è resistente all'acqua. NON immergere il dispositivo in acqua. Non posizionare l'unità all'interno di lavastoviglie. Tale operazione potrebbe causare un danno permanente al dispositivo. In caso di immersione accidentale dell'unità, non tentare di utilizzarla. Contattare il Centro assistenza HoMedics.


## Come pulire la superficie del trattamento

Per pulire la superficie della testina di trattamento del dispositivo Clear+, utilizzare un panno umido, soffice e anti-pelucchi e un detergente delicato senza alcool. Ripetere l'operazione solo con acqua. Asciugare la superficie utilizzando un panno asciutto e pulito.

## Sostituzione della testina di trattamento Clear+

Le testine di trattamento TANDA sono concepite per un numero massimo di 6.000 trattamenti della durata di 3 minuti dopo i quali il dispositivo non emetterà più luce. Le testine di trattamento di ricambio sono disponibili sul sito web [www.homedics.it](http://www.homedics.it).

Se si desidera sostituire la testina di trattamento, fare riferimento alla seguente illustrazione:

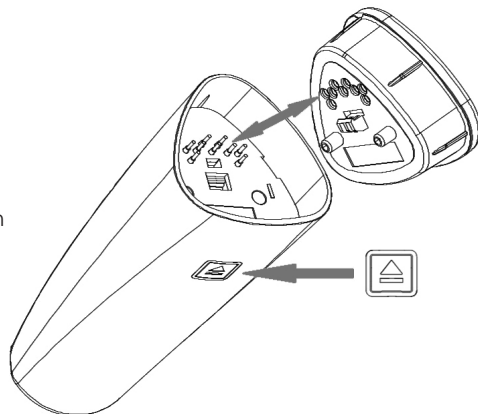

# Suggerimenti per il trasporto

Il design leggero e la forma compatta del dispositivo rendono l'unità un comodo compagno di viaggio.

## **VOLTAGGIO UNIVERSALE**

Il dispositivo è progettato per caricamenti sicuri con sistemi da 110/120V o da 220/240V. È possibile caricare l'unità in Paesi stranieri utilizzando un adattatore per la presa elettrica.

## **PRESE INTERNAZIONALI**

L'alimentazione è dotata di adattatori per prese sia del Regno Unito sia dell'UE.





## Risoluzione dei problemi

In caso di malfunzionamento del dispositivo Clear+, le seguenti note consentiranno all'utilizzatore di identificare potenziali problemi e di riconfigurare l'unità.

Se	Effettuare la seguente operazione
La spia luminosa si spegne mentre l'adattatore di corrente è connesso a una presa AC funzionante.	Il gruppo batterie è completamente carico (il dispositivo è pronto all'uso).  <i>Oppure</i> La batteria non si sta caricando correttamente (assicurarsi che il dispositivo sia fissato in modo stabile sulla base per la ricarica).
Il dispositivo si spegne dopo 3 minuti.	Ciò indica la fine di un ciclo di trattamento. Premere il pulsante arancione per avviare un altro ciclo di trattamento.
Premendo il tasto di accensione arancione, il dispositivo non si avvia.	Assicurarsi che il cappuccio bianco posto come protezione al jack di ricarica non sia inserito.  <i>Oppure</i> Caricare il dispositivo (la luce di segnalazione diventerà arancione se il caricamento verrà eseguito correttamente).  <i>Oppure</i> Verificare che la testina del trattamento sia inserita correttamente.
La spia lampeggia di verde ma la testina di trattamento non si illumina.	Assicurarsi che la superficie luminosa sia a contatto con la pelle.
La spia non è arancione quando il dispositivo è in carica.	Assicurarsi che il dispositivo sia fissato in modo stabile sulla base per la ricarica e che quest'ultima sia collegata ad una presa AC funzionante.
Il dispositivo si spegne a metà trattamento o solo dopo alcuni trattamenti.	Sfilare la testina di trattamento e lasciare raffreddare il dispositivo per 5-10 minuti.  <i>Oppure</i> Assicurarsi di caricare correttamente il dispositivo (si rimanda al paragrafo <b>Caricamento delle batterie</b> ).

In caso di ulteriori domande, visitare il sito web [homedics.it](http://homedics.it) per altri suggerimenti e risoluzioni di problemi.

# Note

# Specifiche

Tanda Clear+ dispositivo = Tanda SERIE 7

Tanda Clear+ testina di trattamento = CLEAR+ SERIE 7



PARTE APPLICATA DI TIPO BF



Attenzione, consultare la DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Batteria al nichel-metallo idruro (NiMH), 4,8 V, 800mAh

Adattatore di corrente specifico: Modello n. UE15WCP-090130SPA, uso medico, corrente d'ingresso: 100-240V, 50-60Hz, 400mA, potenza: 9,0VDC, 1,3A max.



0120



Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici poiché contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute umana. Smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.

**Specifiche operative:** Temperatura ambiente: da 15°C a 35°C RH: dal 15% al 75%, non condensante;

**Pressione atmosferica:** 700 – 1060 Hpa;

**Specifiche ambientali per il trasporto/l'immagazzinamento:** Temperatura ambiente: da 0°C a 60°C;  
RH: dal 10% al 90%

## SMALTIMENTO

Spiegazione direttiva RAEE



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

HoMedics garantisce il presente prodotto contro difetti di materiale e lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, salvo i casi indicati di seguito.

La presente garanzia HoMedics non copre eventuali danni causati dall'utilizzo improprio del prodotto, da eventi accidentali, dall'uso di accessori non omologati, da alterazioni apportate al prodotto o da altre condizioni al di fuori del controllo di HoMedics. La presente garanzia è valida solo se il prodotto è stato acquistato e utilizzato nel RU/UE. La presente garanzia non copre i prodotti che richiedono modifiche o adattamenti per consentirne l'uso in Paesi diversi da quello per il quale sono stati progettati, prodotti, approvati e/o autorizzati, né i prodotti sottoposti a riparazioni per danni prodotti da dette modifiche. HoMedics declina qualunque responsabilità per danni incidentali, consequenziali o speciali.

Per ottenere l'assistenza in garanzia, recarsi presso il Punto di Vendita di acquisto del prodotto muniti dello scontrino recante la data (come prova d'acquisto). Dietro ricevuta, il punto vendita provvederà a riparare o sostituire il prodotto. Nel caso in cui si è impossibilitati a recarsi presso il Punto Vendita, contattare il Servizio Clienti HoMedics al numero +39 02 91483342. La presente Garanzia non è valida qualora la manutenzione del prodotto non venga affidata ad un punto assistenza Homedics autorizzato.

La presente garanzia non inficia i diritti dei consumatori stabiliti dalla legge.

### Informazioni di contatto per l'assistenza clienti:

HoMedics Italy Srl

Via Carducci, 125

20099 Sesto San Giovanni (MI) – Italia

Tel: +39 0269 430776

Email: [tandaservice@homedics.it](mailto:tandaservice@homedics.it)

Sito Internet: [www.homedics.it](http://www.homedics.it)

TANDA

[www.homedics.it](http://www.homedics.it)