
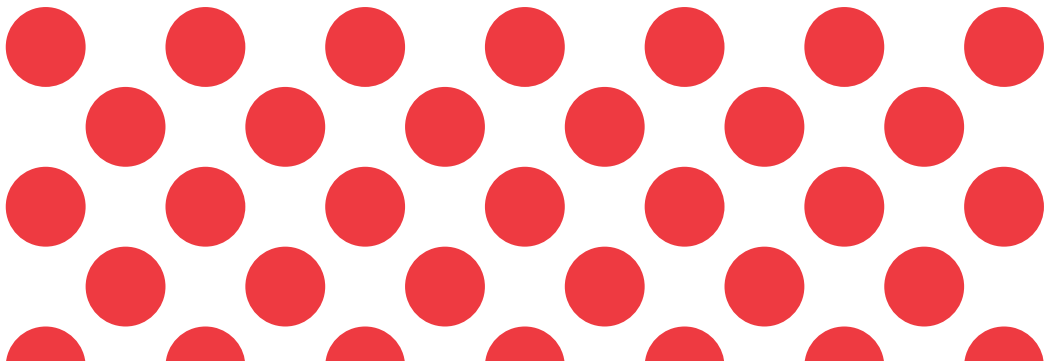


HOMEDICS®

TANDA

luxé™

instructions for use

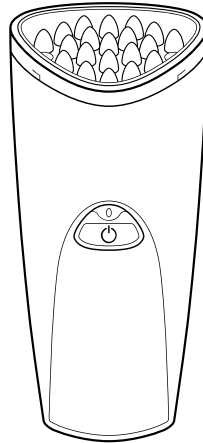

# Grazie...

per aver acquistato il nuovo dispositivo Luxe. Il dispositivo Luxe utilizza una serie di LED super -luminosi per creare un fascio concentrato di raggi di luce rossa per un effetto fototerapico frazionale. Unendo la vibrazione sonora e un leggero calore in una testina massaggiante unica nel suo genere, queste tecnologie complementari offrono un trattamento fototerapico professionale per un viso con una pelle più luminosa, morbida e liscia.

Per informazioni più complete relative alla sicurezza e alle modalità di utilizzo del dispositivo, leggere integralmente il libretto delle istruzioni per l'uso.

## **Informazioni di contatto per l'assistenza clienti:**

HoMedics Italy Srl


Via Carducci, 125

20099 Sesto San Giovanni (MI) – Italia

Tel: +39 0269 430776

Email: [tandaservice@homedics.it](mailto:tandaservice@homedics.it)

Sito Internet: [www.homedics.it](http://www.homedics.it)

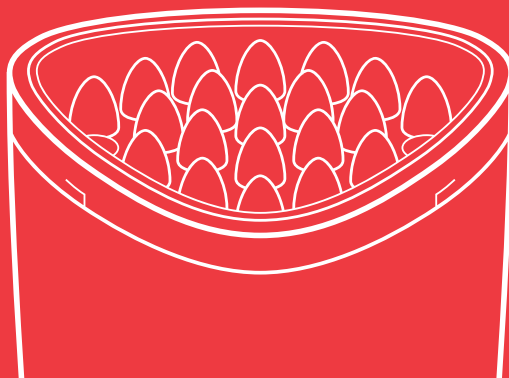


## Contenuto della confezione:

- Testina per i trattamenti Luxe (1)
- Dispositivo ricaricabile senza fili Luxe (2)
- Base per la ricarica (3)
- Alimentatore
- Occhialini di sicurezza

### Componenti:

- Cappuccio in plastica, connettore alimentazione (4)
- Pulsante di accensione arancione (5)
- Luce di segnalazione (6)

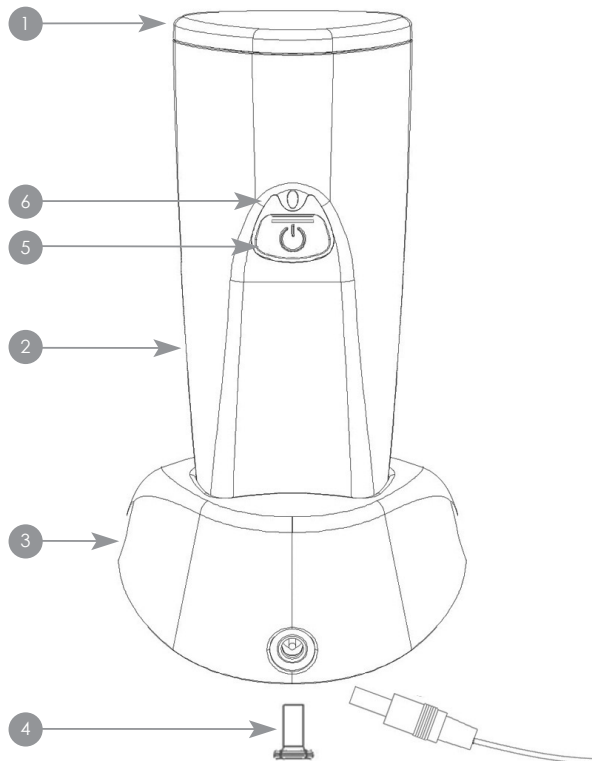

# Utilizzi del dispositivo

Il dispositivo Luxe è utilizzato per il trattamento di rughe, ritidi e linee di espressione nell'area periorbitale (intorno agli occhi), spesso chiamate "zampe di gallina".

## Luxe è il dispositivo che fa per te?

### CLASSIFICAZIONE DELLE RUGHE

Le rughe vengono classificate in base alla Scala delle rughe Fitzpatrick illustrata di seguito. Il funzionamento del dispositivo Luxe è ottimale nelle rughe di Classe I, Classe II e Classe III.

### LA SCALA DELLE RUGHE FITZPATRICK

Classe	Descrizione	Luxe è il dispositivo che fa per te?
• Nessuna ruga	• Nessuna ruga	No
• Classe I	• Rughe sottili	Sì
• Classe II	• Rughe da sottili a moderatamente profonde e quantità limitata di rughe di espressione	Sì
• Classe III	• Rughe da sottili a profonde, numerose linee d'espressione e pieghe ridotte o pieghe	Sì

## Controindicazioni

**Non utilizzare** questo dispositivo su eventuali lesioni sospette o cancerose. L'utilizzo del dispositivo su lesioni cancerose o di altra natura potrebbe determinare un rallentamento del trattamento medico in uso per la patologia. Tra le caratteristiche tipiche di potenziali lesioni cancerose vi sono:

- **Asimmetria:** una metà dell'area cutanea anomala è diversa dall'altra metà
- **Contorni:** contorni irregolari
- **Colore:** varia da un'area all'altra con sfumature marroncino chiaro, marroni o nere (talvolta bianche, rosse e blu)
- **Diámetro:** generalmente (ma non sempre) superiore a 6 mm (diámetro della gomma su una matita)
- **Sanguinamento:** qualsiasi crescita cutanea che sanguina o che non guarirà

**Non utilizzare** in caso di episodi passati di crisi epilettiche.


Si consiglia di testare il dispositivo su una piccola parte di pelle meno sensibile (es.: avambraccio).

### Test di fotosensibilità

Seguire le istruzioni seguenti per verificare l'eventuale fotosensibilità:

1. Premere il pulsante di accensione arancione.
2. Posizionare il dispositivo su un'area dell'avambraccio (come illustrato nel diagramma sulla destra). Mantenerlo a contatto per l'intero ciclo di trattamento della durata di 3 minuti.
3. Premere nuovamente il pulsante di accensione per effettuare un altro trattamento di 3 minuti sulla stessa area interna del braccio.
4. Attendere 24 ore. NON dovrebbero verificarsi controindicazioni nelle 24 ore successive.

Una controindicazione consiste in una sensazione di dolore o di fastidio nelle aree sottoposte al trattamento e in una manifestazione di rossore prolungato della pelle.

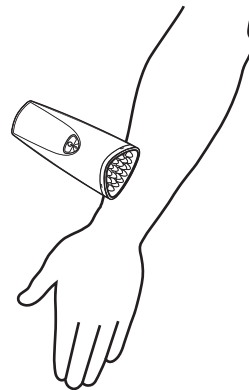

# Avvertenze

**Avvertenza: Interrompere l'utilizzo** del dispositivo in caso di fastidio o di rossore della pelle della durata superiore alle due ore. Potrebbe trattarsi di fotosensibilità o di un'altra condizione patologica. Consultare il proprio medico di fiducia.

**Avvertenza: Non utilizzare** il dispositivo in caso di gravidanza o di allattamento.

**Avvertenza: Non utilizzare** se negli ultimi due anni avete sofferto di un grave attacco di emicrania.

**Avvertenza: Non utilizzare** su ghiandole tiroidee (area del collo). Ciò potrebbe stimolarne la crescita.

**Avvertenza:** Per ridurre il rischio di scariche elettriche che potrebbero determinare lesioni o morte:

- Collegare **sempre** l'adattatore di corrente AC prima al dispositivo, poi alla presa di corrente.
- **Non posizionare** o custodire il dispositivo in punti dai quali potrebbe cadere o essere inavvertitamente spinto in vasche da bagno o lavandini. Non mettere o immergere in acqua o in altri liquidi.
- **Tenere** tutti i dispositivi elettrici (compresa l'unità Luxe) **lontani** dall'acqua (comprese vasche da bagno e docce) In caso di caduta accidentale dell'unità in acqua, staccare immediatamente la spina.
- **Tenere il cavo elettrico lontano** da superfici riscaldate.
- **Non** inserire o **lasciar cadere** oggetti in nessuna delle fessure del dispositivo.
- **Utilizzare esclusivamente** l'adattatore di corrente fornito con il dispositivo Luxe.
- **Non utilizzare** questo dispositivo in caso di danneggiamento del cavo elettrico o della spina, di funzionamento non corretto, di caduta, guasto o immersione in acqua. In caso di guasto contattare il servizio clienti HoMedics (vedi paragrafo Informazioni sulla garanzia).
- **Non manomettere** il dispositivo, questo potrebbe danneggiare l'unità, determinarne il malfunzionamento, causare scosse elettriche, ustioni o lesioni personali. Non sono previste componenti riparabili dall'utilizzatore all'interno dell'unità.
- **Tenere fuori dalla portata** di bambini non sorvegliati da un adulto.

**Avvertenza:** Per prevenire incendi o gravi ustioni:

- In caso di principio di surriscaldamento, **spegnere immediatamente** il dispositivo Luxe.
- **Tenere lontano** da sostanze volatili e infiammabili o da aree in cui viene somministrato ossigeno.

## Precauzioni

**Spegnerne immediatamente**, il dispositivo in caso di eventuali effetti indesiderati o di dubbi sull'utilizzo. Contattare il proprio medico. Potrebbe verificarsi una reazione fotosensibile.

**Utilizzare** il dispositivo esclusivamente per l'uso previsto in base a quanto delineato nel presente manuale.

**Utilizzare** con occhialini di sicurezza protettivi forniti nella confezione Luxe.

**Non guardare direttamente** la fonte luminosa della testina di trattamento del dispositivo durante il funzionamento.

**Non utilizzare** in caso di aumento della condizione patologica della fotosensibilità. Se non si è sicuri di un eventuale aumento della condizione patologica della fotosensibilità, si consiglia di eseguire il Test di fotosensibilità descritto alla pagina 46.

**Non utilizzare** in caso di assunzione di farmaci noti per la loro capacità di causare fotosensibilità. Esempi comuni di composti farmacologici che potrebbero causare la fotosensibilità sono: antistaminici, farmaci per la cura di raffreddore e antiallergici, farmaci non steroidei e anti-infiammatori (FANS/NSAID) utilizzati per ridurre il dolore e l'infiammazione in caso di artrite; antibiotici, compresi tetracicline e sulfamidici o sulfa farmaci. Esempi comuni di composti non farmacologici che potrebbero causare la fotosensibilità sono: deodoranti, saponi antibatterici, dolcificanti artificiali, agenti illuminanti fluorescenti per cellulosa, nylon e fibre legnose, tra cui detersivi per bucato, naftaline (palline di naftalina), prodotti petroliferi e solfuro di cadmio, una sostanza chimica iniettata nella pelle per i tatuaggi.

**Non utilizzare** il dispositivo congiuntamente a steroidi topici, steroidi sistemici o FANS/NSAID per alleviare il dolore o risolvere problemi cutanei. Ciò potrebbe determinare una reazione fotosensibile.

**Non utilizzare** se ci si è sottoposti di recente ad iniezioni di steroidi e nelle aree limitrofe all' area dell'iniezione stessa. Ciò potrebbe determinare una reazione fotosensibile.

**Smaltire** tutti i prodotti conformemente alle disposizioni e ai codici locali e nazionali.

**Non azionare** l'unità in un ambiente in cui vengono utilizzati altri dispositivi che emettono energia elettromagnetica e che vengono utilizzati senza protezione. Radio portatili, cellulari o altri strumenti di comunicazione a radiofrequenza possono compromettere il funzionamento corretto dei dispositivi elettrici medicali.

**Non graffiare**, segnare o danneggiare in altro modo la superficie di emissione luminosa.

**Non puntare** la fonte luminosa negli occhi di altre persone.

**Un utilizzo** e una manutenzione **scorretti** del dispositivo Luxe, ovvero non conformi alle istruzioni delineate in questo manuale, comporteranno l'invalidamento della garanzia.

**Leggere** tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo Luxe.

**Controllare** il dispositivo prima di ogni utilizzo. Verificare l'eventuale presenza di danni.

**Azionare**, trasportare e conservare il dispositivo Luxe in base alle modalità specificate nel presente manuale.

Eventuali **modifiche** o interpretazioni delle procedure diverse da quanto specificato nel presente documento potrebbero provocare ferite.

# Rischi

Pericolo	Probabilità di eventi pericolosi	Conseguenze per l'utilizzatore
Possibili problemi elettrici	Occorrenza improbabile	Shock
Surriscaldamento	Occorrenza sporadica	Fastidio, interruzione del trattamento
Alimentazione non adeguata per l'unità	Occorrenza improbabile	Il dispositivo non sarà funzionante
Utilizzo del prodotto per funzioni diverse da quanto descritto	Occorrenza improbabile	Danno all'unità
L'utilizzatore non segue le istruzioni di manutenzione	Occorrenza improbabile	Perdita di efficacia del prodotto
Surriscaldamento delle batterie	Occorrenza improbabile	Surriscaldamento del manico che può causare fastidio
Esplosione della batteria	Occorrenza improbabile	Può causare ustioni o ferite gravi
Fuoriuscita di liquido dalle batterie	Occorrenza improbabile	Può causare ustioni gravi
Cablaggio in cortocircuito	Occorrenza improbabile	Può determinare il surriscaldamento del manico che può causare, a sua volta, fastidio per l'utilizzatore
L'utilizzatore potrebbe puntare inavvertitamente la luce negli occhi	Occorrenza sporadica	Fastidio e possibile mal di testa
L'utilizzatore potrebbe puntare inavvertitamente la luce negli occhi	Occorrenza improbabile	Fastidio e possibile mal di testa
L'utilizzatore potrebbe avere una pelle sensibile al trattamento con la luce	Occorrenza improbabile	Può causare l'arrossamento della pelle
L'utilizzatore sta assumendo dei medicinali o erbe che causano una maggiore fotosensibilità	Occorrenza improbabile	Può causare l'arrossamento della pelle
Utilizzo del prodotto ogni giorno per un periodo di tempo superiore all'esposizione massima raccomandata per ciascuna area	Occorrenza sporadica	Trattamento non efficace



Pericolo	Probabilità di eventi pericolosi	Conseguenze per l'utilizzatore
Utilizzo del dispositivo intorno all'area del collo da parte di persone con patologia tiroidea	Occorrenza improbabile	Possibile sollecitazione della crescita delle ghiandole tiroidee
Utilizzo del dispositivo da parte di soggetti che si sono sottoposti di recente a iniezioni steroidee	Occorrenza improbabile	Reazioni non previste

Sono elencati esclusivamente i rischi noti correlati al dispositivo. Durante l'utilizzo del dispositivo, potrebbero verificarsi rischi diversi da quelli verificatisi durante la sperimentazione che potrebbe non essere stata esaustiva. Gli utilizzatori del dispositivo possono ridurre i possibili rischi derivanti dall'utilizzo solo leggendo accuratamente il manuale d'uso in tutte le sue parti e seguendo scrupolosamente tutte le istruzioni, le controindicazioni, le avvertenze e le precauzioni previste.

## Benefici

Beneficio	Probabilità di occorrenza del beneficio	Conseguenze per l'utilizzatore
Riduzione delle rughe e delle linee di espressione nell'area periorbitale	Frequente	Maggiore idratazione e consistenza dell'area trattata unita a una riduzione di rughe, ritidi e linee di espressione.

Gli utilizzatori del dispositivo possono ottenere benefici dall'utilizzo dell'unità solo nel caso in cui abbiano letto e compreso tutte le informazioni e seguito scrupolosamente tutte le istruzioni contenute nel manuale utente.

# Informazioni sull'invecchiamento

Con il passare del tempo, la nostra pelle tende a deteriorarsi, perdere di elasticità e tonicità. La tonicità viene a mancare nel momento in cui vi è una diminuzione del livello di collagene. Il deterioramento si manifesta con ruvidità ,opacità generale, rossore, linee di espressione marcate e rughe.

## La scienza dietro la luce rossa

Per molti anni, la terapia a luce rossa è stata ampiamente utilizzata dai dermatologi e dai professionisti del trattamento della pelle per i suoi benefici ringiovanenti. È stato dimostrato che specifiche lunghezze d'onda di luce rossa determinano un incremento dell'energia cellulare complessiva, in grado di stimolare la produzione naturale di collagene ed elastina da parte del corpo e un aumento della microcircolazione. Il risultato consiste in una pelle più rinvigorita, più tonica e dall'aspetto più giovane.

Godete di risultati professionali nel ringiovanimento della pelle comodamente a casa vostra.

## Avvio

### Configurazione del dispositivo

È facile iniziare a lavorare con il dispositivo Luxe.


1. Rimuovere il dispositivo e i suoi accessori dall'imballo.
2. Staccare il rivestimento protettivo dalla testina di trattamento e buttarlo via.
3. Il dispositivo presenta una batteria interna ricaricabile. Per il primo utilizzo, sarà necessario caricare completamente il dispositivo per circa 4 ore. Consultare il paragrafo **Caricamento delle batterie** per maggiori dettagli.

## Caricamento delle batterie

- Prima di caricare il dispositivo, rimuovere il cappuccio di plastica (4) dalla parte inferiore del manico senza fili Tanda. In caso di mancata esecuzione di questa operazione, non sarà possibile inserire correttamente l'unità nella base ricaricabile.
- Posizionare il dispositivo in modo stabile sulla base per la ricarica (3).
- Collegare l'alimentazione alla base per la ricarica e l'altra estremità alla presa di corrente AC (es.: una presa da muro).
- Il dispositivo impiegherà approssimativamente 4 ore per ricaricarsi.
- La luce di segnalazione (6) diventerà arancione durante la carica del dispositivo e si spegnerà una volta completata.
- Il dispositivo è ora pronto per essere utilizzato con la sola batteria. Un dispositivo completamente carico sarà in grado di eseguire 10 cicli da tre minuti.

### Nota:

- È possibile utilizzare il dispositivo anche collegato a una presa di corrente AC (es.: una presa da muro). Collegare semplicemente un'estremità dell'alimentazione al comparto sulla parte inferiore del manico e l'altra estremità alla presa AC nel muro. Il dispositivo preleverà la carica dalla presa di corrente AC.

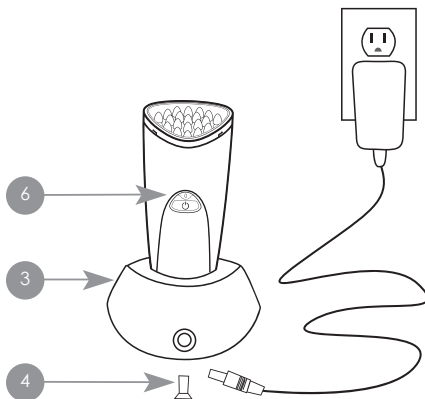

# Comandi del dispositivo Luxe

Il dispositivo prevede spie luminose e sonore che consentono di scandire i cicli di trattamento e di verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

## Segnalazioni luminose

Verde lampeggiante	Il dispositivo è pronto oppure si sta eseguendo un trattamento
Arancione fisso	È in corso il caricamento della batteria
Rosso fisso	Si è verificato un errore. Ciò potrebbe dipendere da: un problema nel posizionamento della testina, verificare che sia posizionata correttamente nel suo alloggiamento Il livello di batteria è basso L'unità potrebbe essersi surriscaldata. Spegnerne e lasciar raffreddare per almeno 5-10 minuti prima di riaccendere Luxe
Off	Il dispositivo è spento

## Segnalazioni sonore

Un bip	Avvio del trattamento
Un bip veloce ogni 30 secondi	È in corso un trattamento e sono passati 30 secondi dall'ultimo bip o dall'inizio del trattamento
Due bip	Fine del ciclo di trattamento oppure batteria scarica
Tre bip	Temperatura elevata sulla superficie della testina di trattamento
Quattro bip	La testina non è posizionata correttamente nel suo alloggiamento o è stata rimossa ad unità accesa

# Modalità di utilizzo

## Acquisire familiarità con il dispositivo

Il dispositivo è concepito garantendo la massima sicurezza e facilità di utilizzo.

- Per attivare il dispositivo, premere una volta il pulsante di accensione arancione. Una volta eseguita questa operazione, la luce di segnalazione si illuminerà di verde.
- La testina di trattamento del dispositivo prevede un  **sensore di contatto**  integrato che fa attivare rispettivamente la luce rossa ringiovanente, la vibrazione sonora e il leggero calore solo nel momento in cui la testina entra a contatto con la pelle. L'unità si spegnerà automaticamente se non viene a contatto con la pelle entro 20 secondi o se il trattamento viene interrotto per un tempo superiore ai 20 secondi.
- La testina di trattamento del dispositivo prevede una funzione di sicurezza aggiuntiva integrata che consiste in un  **sensore della temperatura**  in grado di spegnere l'unità in caso di surriscaldamento della superficie del dispositivo. Far raffreddare il dispositivo per 5-10 minuti prima del riavvio.
- Il dispositivo funziona in base a cicli della durata di tre minuti. Un bip sonoro emesso ogni 30 secondi indicherà l'accensione del dispositivo. Due bip veloci indicheranno il completamento del ciclo. Premere il pulsante di accensione per riattivare l'unità.

## Passo 1: Preparazione della pelle per il trattamento


Prima dell'utilizzo, detergere la pelle per rimuovere eventuali creme o prodotti cosmetici che potrebbero contenere sostanze riflettenti.

## Passo 2: Trattamento della pelle

Dopo aver attivato il dispositivo Luxe, posizionare delicatamente la testina di trattamento sulle aree interessate (ad es.: intorno agli occhi) per 3 minuti, due volte alla settimana.

## Passo 3: Dopo il trattamento

Idratare la parte trattata con i prodotti che solitamente utilizzate e preferite. Adesso la vostra pelle è pronta ad assorbirli più efficacemente.

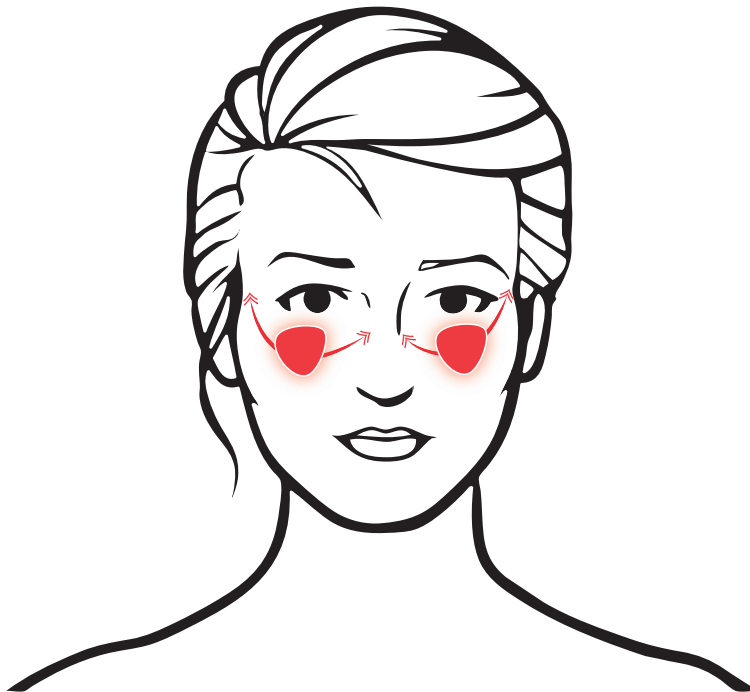

**PERSONALIZZATE I VOSTRI TRATTAMENTO POSIZIONANDO IL DISPOSITIVO SULLE AREE DI VOSTRO INTERESSE**

Nei tre minuti di trattamento è possibile mantenere il dispositivo fisso in una zona o farlo scorrere sulla superficie interessata.



# Cosa aspettarsi da LUXE

## DURANTE IL TRATTAMENTO:

Si avvertirà una sensazione di calore accompagnata da una leggera vibrazione sulla pelle spesso considerata rilassante. In molti casi è stato notato un aumento immediato dell'idratazione e della tonicità della pelle.

## DOPO 1 SETTIMANA DI TRATTAMENTO:

In numerosi casi si inizierà a osservare un miglioramento della struttura della pelle e si osserverà un aumento della sensazione di benessere e della levigatezza della propria pelle.

## DOPO 2 SETTIMANE DI TRATTAMENTO:

Nella maggior parte dei casi si noterà una riduzione dei segni complessivi dell'invecchiamento e nello specifico, un aumento della tonicità della pelle.

## DOPO 4 SETTIMANE DI TRATTAMENTO:

In molti casi, si osserverà una condizione di miglioramento generale della pelle rispetto alla fase precedente al trattamento. Questo si manifesta in un un miglioramento dell'aspetto di benessere della pelle e in una riduzione delle linee di espressione e delle rughe.

## Sicurezza degli occhi

Gli occhiali protettivi sono forniti per garantire comfort e sicurezza a quelle persone che percepiscono l'intensità della luce come troppo elevata. Test di laboratorio condotti aziendali hanno dimostrato che la luce emessa dal dispositivo, se usata seguendo le avvertenze contenute nel presente manuale d'uso, non rappresenta un rischio per gli occhi.

- Posizionare gli occhiali protettivi davanti agli occhi.
- Regolare la fascia elastica in modo da adattare comodamente gli occhiali protettivi intorno alla testa.

**Nota:** Non puntare la fonte luminosa direttamente negli occhi.

# Manutenzione del dispositivo

Le istruzioni di manutenzione che seguono rappresentano suggerimenti importanti per garantire un funzionamento duraturo del dispositivo così come da progettazione. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare un'interruzione dell'erogazione dell'emissione della luce o del funzionamento complessivo del dispositivo.

## Gestione della batteria

Si consiglia di tenere il dispositivo completamente carico. Dopo l'utilizzo, posizionare il dispositivo sulla base per la ricarica. Non è possibile eseguire una ricarica eccessiva del dispositivo.

In caso di mancato utilizzo del dispositivo per periodi di tempo prolungati, si consiglia di lasciarlo nell'alloggiamento senza collegare l'adattatore di corrente.

## Pulizia

Dopo ogni utilizzo, si consiglia di pulire la superficie della testina di trattamento.

Il dispositivo non è resistente all'acqua. **NON** immergere il dispositivo in acqua. Non posizionare l'unità all'interno di lavastoviglie. Tale operazione potrebbe causare un danno permanente al dispositivo. In caso di immersione accidentale dell'unità, non tentare di utilizzarla. Contattare il Centro assistenza HoMedics.


## Come pulire la superficie del trattamento

Per pulire la superficie della testina di trattamento del dispositivo Luxe, utilizzare un panno umido, soffice e anti-pelucchi e un detergente delicato senza alcool. Ripetere l'operazione solo con acqua. Asciugare la superficie utilizzando un panno asciutto e pulito.

## Sostituzione della testina di trattamento Luxe

Le testine di trattamento Tanda sono concepite per un numero massimo di 6.000 trattamenti della durata di 3 minuti dopo i quali il dispositivo non emetterà più luce. Le testine di trattamento di ricambio sono disponibili sul sito web [www.homedics.it](http://www.homedics.it).

Se si desidera sostituire la testina di trattamento, fare riferimento alla seguente illustrazione:

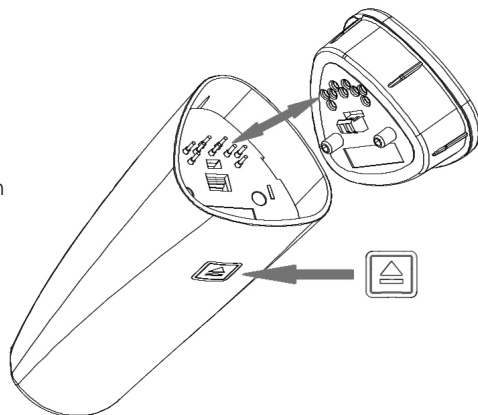



## Suggerimenti per il trasporto

Il design leggero e la forma compatta del dispositivo rendono l'unità un comodo compagno di viaggio.

### **VOLTAGGIO UNIVERSALE**

Il dispositivo è progettato per caricamenti sicuri con sistemi da 110/120V o da 220/240V. È possibile caricare l'unità in Paesi stranieri utilizzando un adattatore per la presa elettrica.

### **PRESE INTERNAZIONALI**

L'alimentazione è dotata di adattatori per prese sia del Regno Unito sia dell'UE.

# Risoluzione dei problemi

In caso di malfunzionamento del dispositivo, le seguenti note consentiranno di identificare potenziali problemi e di riconfigurare l'unità.

Se	Effettuare la seguente operazione
La spia luminosa si spegne mentre l'adattatore di corrente è connesso a una presa AC funzionante.	Il gruppo batterie è completamente carico (il dispositivo è pronto all'uso). <i>Oppure</i> La batteria non si sta caricando correttamente (assicurarsi che il dispositivo sia fissato in modo stabile sulla base per la ricarica).
Il dispositivo si spegne dopo 3 minuti.	Ciò indica la fine di un ciclo di trattamento. Premere il pulsante arancione per avviare un altro ciclo di trattamento.
Premendo il pulsante di accensione il dispositivo non si avvia.	Assicurarsi che la spina bianca posta come protezione al jack di ricarica non sia inserita. <i>Oppure</i> Caricare il dispositivo (la luce di segnalazione diventerà arancione se il caricamento verrà eseguito correttamente). <i>Oppure</i> Verificare che la testina del trattamento sia inserita correttamente.
La luce di segnalazione lampeggia di verde ma la testina di trattamento non è illuminata.	Assicurarsi che la superficie luminosa sia a contatto con la pelle.
La luce di segnalazione non è arancione quando il dispositivo è in carica.	Assicurarsi che Luxe sia inserito correttamente nella base di ricarica e che quest'ultima sia collegata ad una presa AC funzionante.
Il dispositivo si spegne a metà trattamento o solo dopo alcuni trattamenti.	Sfilare la testina di trattamento e lasciare raffreddare il dispositivo per 5-10 minuti. <i>Oppure</i> Assicurarsi di caricare correttamente il dispositivo (si rimanda al paragrafo <b>Caricamento delle batterie</b> ).

In caso di ulteriori domande, visitare il sito web [homedics.it](http://homedics.it) per altri suggerimenti e risoluzioni di problemi.



# Specifiche

Tanda Luxe dispositivo = Tanda SERIE 7

Tanda Luxe testina di trattamento = LUXE SERIE 7



PARTE APPLICATA DI TIPO BF




Attenzione, consultare la DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Batteria al nichel-metallo idruro (NiMH), 4,8 V, 800mAh

Adattatore di corrente specifico: Modello n. UE15WCP-090130SPA, uso medico, corrente d'ingresso: 100-240V, 50-60Hz, 400mA, potenza: 9,0VDC, 1,3A max.



 Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici poiché contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute umana. Smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.

**Specifiche operative:** Temperatura ambiente: da 15°C a 35°C RH: dal 15% al 75%, non condensante;

**Pressione atmosferica:** 700 – 1060 Hpa;

**Specifiche ambientali per il trasporto/l'immagazzinamento:** Temperatura ambiente: da 0°C a 60°C;  
RH: dal 10% al 90%

## SMALTIMENTO

Spiegazione direttiva RAEE



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

HoMedics garantisce il presente prodotto contro difetti di materiale e lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, salvo i casi indicati di seguito.

La presente garanzia HoMedics non copre eventuali danni causati dall'utilizzo improprio del prodotto, da eventi accidentali, dall'uso di accessori non omologati, da alterazioni apportate al prodotto o da altre condizioni al di fuori del controllo di HoMedics. La presente garanzia è valida solo se il prodotto è stato acquistato e utilizzato nel RU/UE. La presente garanzia non copre i prodotti che richiedono modifiche o adattamenti per consentirne l'uso in Paesi diversi da quello per il quale sono stati progettati, prodotti, approvati e/o autorizzati, né i prodotti sottoposti a riparazioni per danni prodotti da dette modifiche. HoMedics declina qualunque responsabilità per danni incidentali, consequenziali o speciali.

Per ottenere l'assistenza in garanzia, recarsi presso il Punto di Vendita di acquisto del prodotto muniti dello scontrino recante la data (come prova d'acquisto). Dietro ricevuta, il punto vendita provvederà a riparare o sostituire il prodotto. Nel caso in cui si è impossibilitati a recarsi presso il Punto Vendita, contattare il Servizio Clienti HoMedics al numero +39 02 91483342. La presente Garanzia non è valida qualora la manutenzione del prodotto non venga affidata ad un punto assistenza Homedics autorizzato.

La presente garanzia non inficia i diritti dei consumatori stabiliti dalla legge.

### Informazioni di contatto per l'assistenza clienti:

HoMedics Italy Srl

Via Carducci, 125

20099 Sesto San Giovanni (MI) – Italia

Tel: +39 0269 430776

Email: [tandaservice@homedics.it](mailto:tandaservice@homedics.it)

Sito Internet: [www.homedics.it](http://www.homedics.it)

TANDA

[www.homedics.it](http://www.homedics.it)