


HOMEDICS®

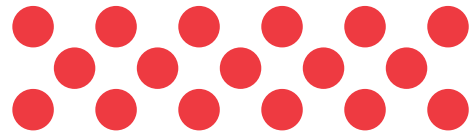

TANDA

luxe™

Wichtige Sicherheitsinformationen

Es ist wichtig, dass Sie Luxe wie angegeben anwenden. Für wichtige Sicherheit- und Anwendungsinformationen dieses Gerätes, lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsanleitung.

Achtung: NICHT BENUTZEN, wenn Sie empfindlich auf Licht reagieren oder Arznei einnehmen, die Lichtempfindlichkeit verursacht. Benutzen Sie dieses Gerät NIE auf verdächtigen oder krebsartigen Hautverletzungen. NICHT BENUTZEN, wenn Sie schwanger sind. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.

Ist Luxe für Sie geeignet?

Luxe wird zur Behandlung von Falten, Fältchen und feinen Linien um die Augen herum, oft auch "Krähenfüße" genannt, angewendet.

Benutzung

Ihr Gerät hat eine eingebaute, wiederaufladbare Batterie. Vor der ersten Benutzung müssen Sie das Gerät ca. 4 Stunden aufladen.

Schritt 1: Vorbereitung der Haut für die Behandlung

Reinigen Sie die Haut vor der Benutzung, um Make-up oder Cremes zu entfernen, die reflektierend sein könnten.

Schritt 2: Behandeln Sie die Haut

Drücken Sie den orangefarbenen Einschaltknopf einmal zum Einschalten des Luxe Gerätes. Platzieren Sie den Behandlungskopf zweimal wöchentlich 3 Minuten sanft leicht über der Behandlungszone (z. B. um die Augen herum).

Schritt 3: Nach der Behandlung

Tragen Sie Ihre bevorzugte Hautcreme auf, da Ihre Haut jetzt besser darauf vorbereitet ist, diese aufzunehmen.

Luxe-Bedienelemente

Das Gerät hat mehrere benutzerfreundliche Eigenschaften für eine sichere und einfache Anwendung.

Sensoren

Kontaktsensor	Das verjüngende Rotlicht, die akustische Vibration und die sanfte Erwärmung werden erst dann aktiviert, wenn der Behandlungskopf direkten Kontakt mit der Haut hat.
Temperatursensor	Der Behandlungskopf einen eingebauten Temperatursensor, der das Gerät abstellt, falls der Behandlungskopf sich zu sehr erwärmt. Lassen Sie das Gerät vor dem erneuten Betrieb 5-10 Minuten abkühlen.

Lichtanzeigen

Grünes Blinken	Das Gerät ist fertig oder führt eine Behandlung durch
Ständig orangefarben	Der Akku wird aufgeladen
Ständig rot	Es liegt ein Fehler vor. Dieser könnte sein: <ul style="list-style-type: none"> • Ein Problem bei der Installation des Behandlungskopfes • Der Akku ist nicht genügend aufgeladen • Das Gerät könnte überhitzt sein
Aus	Das Gerät ist aus

Tonanzeigen

Ein Piepton	Behandlungsbeginn
Ein schneller Piepton alle 30 Sekunden	Eine Behandlung findet statt und seit dem letzten Piepton oder dem Beginn der Behandlung sind 30 Sekunden vergangen
Zwei Pieptöne	Ende des Behandlungszyklus oder die Batterie ist fast leer
Drei Pieptöne	Hohe Temperatur an der Oberfläche des Behandlungskopfes
Vier Pieptöne	Der Behandlungskopf hat sich gelöst