

HOMEDICS®

TANDA

zap™

instructions for use



DE

HoMedics Service Center:

HoMedics Deutschland GmbH

Neuhäuser Str. 61b

33102 Paderborn

email tandaservice@homedics.de




TANDA zap

Vielen Dank ...

dass Sie sich für Zap entschieden haben. Zap, das Behandlungsgerät gegen Aknepickel wurde klinisch erprobt als schneller Weg zur Beseitigung von einzelnen Aknestellen. Starkes blaues LED-Licht zerstört die Akne verursachenden Bakterien, während akustische Vibration und sanftes Erwärmen dabei helfen, die Poren zu öffnen, sodass sich die Bakterien der Behandlung nicht entziehen können. Schmerzlos. Ohne auszutrocknen. Ohne zu reizen. Und am Ende ohne Pickel!

Geräteteile:

- Zap-Behandlungskopf (1)
- Anzeileuchte (2)
- Ein-/Aus-Schalter (3)
- Batteriefachöffnung (4)

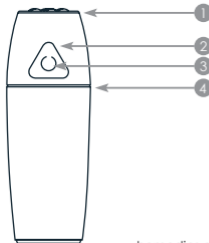

Wofür wird das Gerät benutzt?

Der Zap eignet sich für die Behandlung milder bis mäßig entzündlicher Akne (einige/viele entzündete (rote) Pickel). Das Zap ist nicht geeignet für die Behandlung starker knotiger oder zystischer Akne.

Gegenanzeigen

- **ACHTUNG! Verwenden Sie** dieses Gerät nie auf Hautverletzungen, die nicht von milder bis mäßiger Akne stammen. Dies könnte zu Verzögerungen der besten medizinischen Behandlung führen.
- **ACHTUNG! Lassen Sie** Kinder unter 14 Jahren dieses Gerät nicht ohne Aufsicht benutzen - dies könnte zu Augenverletzungen führen.
- **ACHTUNG! Nicht bei** Lichtempfindlichkeit benutzen. Dies könnte zu einer lichtempfindlichen Reaktion führen. Es wird empfohlen, einen Test an einer kleinen, wenig empfindlichen Hautstelle (wie z. B. Ihrem Unterarm) durchzuführen.



Lichtempfindlichkeitstest

Folgen Sie diesen Anweisungen, um herauszufinden, ob Sie lichtempfindlich sind:

1. Drücken Sie den orangefarbenen Einschaltknopf.
2. Das Gerät vibriert und das die Bakterien abtötende blaue Licht leuchtet auf.
3. Platzieren Sie das Zap für den zweiminütigen Behandlungszyklus sanft auf Ihrem inneren Unterarm.
4. Drücken Sie den orangefarbenen Einschaltknopf erneut für eine weitere zweiminütige Behandlung derselben Stelle an Ihrem inneren Uderarm.
5. Warten Sie 24 Stunden. Sie sollten in den nächsten 24 Stunden KEINE Nebenwirkung erleben.
6. Nebenwirkungen sind Schmerzen oder Beschwerden an den behandelten Stellen oder jegliche länger währende Hautrötung.



- **ACHTUNG! Nicht verwenden**, wenn Sie Medikamente einnehmen, die Sie lichtempfindlich machen. Allgemeine Beispiele für Medikamente, die Sie lichtempfindlich machen können, sind: Antihistamine in Arzneien gegen Erkältungen und Allergien; nichtsteroidale entzündungshemmende Arzneimittel (NSAIDs), die zur Schmerz- und Entzündungslinderung benutzt werden sowie Antibiotika, einschließlich Tetrazykline und Sulfonamide.
- **ACHTUNG! Nicht benutzen** in Verbindung mit Einreibungsmitteln, Salben oder Cremes, die Wärme erzeugende Bestandteile haben, da dies zu Hautverbrennungen führen könnte.
- **ACHTUNG! Nicht benutzen** an oder in der Nähe von Stellen, an denen vor Kurzem eine Steroidinjektion verabreicht wurde. Dies könnte zu einer lichtempfindlichen Reaktion führen.
- **ACHTUNG! Nicht** an oder um die Augen oder Augenlider herum benutzen und nicht direkt in das blaue Licht schauen. Dies könnte zu ernsthaften Augenverletzungen führen, einschließlich Blindheit oder vorübergehendem Verlust der Sehkraft.
- **ACHTUNG! Nicht** auf der Schilddrüse (am Hals) benutzen. Dies könnte die Drüse stimulieren.

Warnungen

Warnung: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, der zu Verletzungen oder zum Tod führen könnte:

- Legen Sie das Gerät nie so hin, dass es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen könnte. Legen Sie es nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Führen Sie nie irgendein Objekt in eine der Öffnungen des Gerätes ein.
- Benutzen Sie nur Batterien, die für dieses Gerät empfohlen werden.
- Benutzen Sie dieses Gerät nie, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt oder in Wasser eingetaucht wurde.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie annehmen, dass Sie das Gerät für längere Zeit, wie etwa einen Monat lang, nicht benutzen werden.
- Zerlegen Sie das Instrument nicht, da dies zu Geräteschaden, Defekten, Stromschlag, Feuer oder Verletzungen führen kann. Im Gerät befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.



Warnung: Zur Verhinderung von Feuer oder möglichen Verbrennungen:

1. Halten Sie das Gerät von entflammaren treibgashaltigen Produkten oder Sauerstoff fern.
2. Schalten Sie das Gerät ab, wenn es sich ungewöhnlich warm anfühlt.

Warnung: Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie irgendwelche Nebenwirkungen verspüren oder länger anhaltende Rötungen entwickeln. Sie könnten eine lichtempfindliche Reaktion erleiden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Lesen Sie alle Anweisungen vor der Benutzung Ihres Zap.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur für den beabsichtigten Zweck, wie er in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben wird. Im Falle der Nichtbeachtung kann dies zu einer Verzögerung der angezeigten Behandlung führen.
- Hören Sie mit der Behandlung auf, falls Sie Beschwerden verspüren. Sie könnten lichtempfindlich sein.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle des Behandlungskopfes dieses Gerät, während es in Betrieb ist. Im Falle der Nichtbeachtung kann dies zu Kopfschmerzen oder Augenschäden führen.

- Benutzen Sie dieses Gerät nicht dort, wo andere Geräte, die elektromagnetische Energie ungeschützt abstrahlen, eingesetzt werden. Radiofrequenzen von tragbaren oder mobilen Kommunikationsgeräten können medizinische elektrische Geräte beeinträchtigen.

Benutzung

Bitte beachten Sie, dass manche Menschen lichtempfindlich sind. Wenn Sie annehmen, dass Sie lichtempfindlich sind, sollten Sie das Zap-Gerät nicht ohne einen vorherigen Lichtempfindlichkeitstest benutzen. Informieren Sie sich über den Lichtempfindlichkeitstest wie auf Seite 3 beschrieben.

Schritte:

1. Drücken Sie den orangefarbenen Einschaltknopf.
2. Das Gerät vibriert und das die Bakterien abtötende blaue Licht leuchtet auf. Schauen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl.
3. Platzieren Sie das Zap-Gerät 2 Minuten sanft zwischen lang und über der Aknestelle. Sobald die Vibration aufhört, ist der Behandlungszyklus beendet.
4. Wiederholen Sie dies 2 bis 3 Mal täglich.

Zap-Betriebsanzeige

Sie können die Behandlung jederzeit beenden, indem Sie den orangefarbenen Einschaltknopf drücken. Sollten Sie die Behandlung innerhalb der ersten 30 Sekunden beenden, wird das Gerät **die Behandlung** nicht registrieren. Beenden Sie die Behandlung nach 30 Sekunden, registriert **das Gerät** die Behandlung.

Ihr Zap-Gerät kann 1000 Mal benutzt werden. Sobald Ihr Zap-Gerät weniger als 50 Behandlungen zur Verfügung hat, wird der orangefarbene Einschaltknopf nach jeder Behandlung rot weiterleuchten, um Sie daran zu erinnern, dass Sie ein Ersatzgerät benötigen.

Sobald Ihr Zap die 1000 Behandlungen beendet stellt, lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten und der orangefarbene Einschaltknopf leuchtet ständig rot.



Geräteanzeigen

Ständige Vibration und blaues Licht	Das Gerät führt eine Behandlung durch
Der orangefarbene Einschaltknopf blinkt nach jeder Behandlung 10 Sekunden lang rot	Die Batterien sind fast verbraucht
Der orangefarbene Einschaltknopf bleibt nach jeder Behandlung 10 Sekunden lang rot	Das Gerät bietet nur noch weniger als 50 Behandlungen.
Das Gerät lässt sich nicht anschalten und der orangefarbene Einschaltknopf bleibt 10 Sekunden lang rot	Das Gerät hat keine Behandlungen mehr übrig. Sie müssen einen neuen Zap kaufen!

Batterielebensdauer und -austausch


Wenn Ihre Zap-Batterien nur noch wenig Lebensdauer haben, blinkt der orangefarbene Einschaltknopf nach jeder Behandlung rot. Benutzen Sie AAA-Alkalibatterien (IEC LR03).

Seien Sie umweltfreundlich! HoMedics empfiehlt den Kauf wiederaufladbarer AAA-Batterien.

Bitte beachten Sie: Bei wiederaufladbaren Batterien kann die Lebensdauer variieren. NiMH-Batterien aus Nickel- Metallhydrid werden empfohlen.

Um die Batterien in Tanda Zap-Gerät zu installieren oder auszutauschen, folgen Sie bitte diesen Anweisungen:

1. Drehen Sie das Oberteil des Gerätes entgegen dem Uhrzeigersinn, um die zwei Dreiecke oben und am Oberteil und Unterteil des Gerätes in eine Linie zu bringen.
2. Entfernen Sie die verbrauchten Batterien aus der Halterung.
3. Installieren Sie 3 neue AAA-Batterien entsprechend der Symbole auf dem Batterienhalter.
4. Um das Zap-Gerät zu schließen, bringen Sie die beiden Dreiecke in eine Linie, drücken das Oberteil des Geräts und drehen es im Uhrzeigersinn, bis das Dreieck mit der vertikalen Linie in einer Linie ist und sicher sitzt.

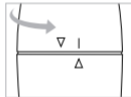



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Stoffe enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen Sie die Batterien bitte an den hierfür vorgesehenen Sammelstellen.

Reinigungsanweisungen

Benutzen Sie ein feuchtes, weiches, fusselfreies Tuch und ein mildes, alkoholfreies Reinigungsmittel, um die Behandlungsoberfläche des Zap zu reinigen.

Bitte beachten Sie: Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.



Spezifikationen

Tanda Zap Gerät = TANDA SERIES 4



TYP BF ANGEWANDTES TEIL



Achtung, lesen Sie die MITGELIEFERTEN DOKUMENTE

RISIKOGRUPPE 2

VORSICHT Dieses Produkt strahlt möglicherweise schädliche optische Strahlen aus. Schauen Sie nicht in die Lampe. Möglicherweise schädlich für Ihre Augen.



ENTSORGUNG

WEEE-Erklärung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Damit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß und fördern Sie damit eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres benutzten Gerätes bitte für die Entsorgung eingerichtete Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Auf diese Weise kann ein sicheres und umweltfreundliches Recycling gewährleistet werden.

HoMedics Inc. garantiert für dieses Produkt ab Kaufdatum eine 2-jährige Garantiezeit gegenüber Material- und Qualitätsmängel, außer für Folgendes.

Diese Produktgarantie von HoMedics umfasst nicht Schäden durch falsche oder missbräuchliche Anwendung, Unglücksfälle, Anbringung unerlaubten Zubehörs, Änderungen am Produkt oder andere Bedingungen, die außerhalb der Kontrolle von HoMedics liegen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Produkt in Großbritannien / EU gekauft und verwendet wird. Ein Produkt, das Veränderungen oder Anpassungen benötigt, damit es in einem anderen Land verwendet werden kann, für das es nicht vorgesehen, gefertigt, genehmigt und/oder zugelassen war, oder die Reparatur von Produkten, die durch diese Änderungen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. HoMedics ist nicht verantwortlich für zufällige und Folgeschäden oder besondere und zusätzliche Schadensansprüche.

HoMedics Service Center:

HoMedics Deutschland GmbH

Neuhäuser Str. 61b

33102 Paderborn

email tandaservice@homedics.de

TANDA

www.homedics.de